

从一个靶点、分子、专利或 PDF 开始一项竞对调研

输入框自动识别类型；也可以画结构，或直接拖入手头的专利 / 论文 PDF。结果都汇入同一个调研，每条结构和活性都能回到原文页码。

专利公开号 / SMILES / 靶点 / 药物名

W02013132376A1

画结构

开始检索

拖入专利或论文 PDF，从文件开始调研

支持多份 · 在本机解析，不上传外部服务 · 抽取结果以“待确认”进入复核队列

选择文件

识别为专利公开号

与调研「ALK 大环系列 · 辉瑞」中的家族 48142828 相同

打开该调研 →

另建新调研

试试：

ALK

CHEMBL4247

洛拉替尼 SMILES

W02011138751A2

我的调研

ALK 大环系列 · 辉瑞

ALK · 人源 · CHEMBL4247

2 个专利家族

1 篇论文

35 条结构记录

271 条观测

目标：改善细胞活性，同时控制外排

已确认 0 · 全部待确认

+ 新建空白调研

示例调研 · 文献数据集

洛拉替尼发现论文

Johnson et al., 2014 · 29 个结构 · 247 项测量

L1 数据库

奥希替尼发现论文

Finlay et al., 2014 · 2 个结构 · 49 项测量

L1 数据库

ALK 大环系列 · 辉瑞

靶点 ALK · 人源 · ChEMBL4247 · 2 个专利家族 · 1 篇论文

概览

证据

SAR 分析

时间线与程序

对照

报告

+ 添加专利 / 分子

生成报告

专利家族

2

优先权 2010-05-04 至 2012-03-06

台账范围（结构记录 / 观测）

35 / 271

专利证据卡 6 · 论文 29；观测含 2 项未测

项目目标

改善细胞活性，同时控制外排

4 个性质 · 查看 SAR 分析 →

具名确认（L3）

0

6 张证据卡待独立复核 · 去复核队列 →

家族时间线

按来源记载的优先权日排列 · 同族公开已合并


展开时间线与程序 →

2010 2011 2012

2010-05-04 家族 44278717

W02011138751A2

开链醚系列 · Examples 1、6、7 · 10 项测量

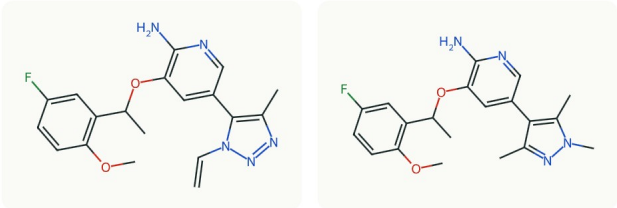


2012-03-06 家族 48142828

引用较早家族

W02013132376A1

大环酰胺系列 · Examples 2、4、6 · 12 项测量

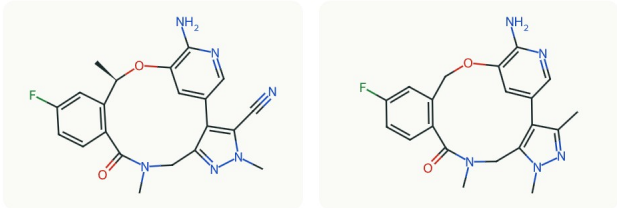

跨家族关系

事实、研究假设与证据缺口分栏；只有你可以把假设写成结论

可核查事实 · 3

较晚专利 W02013132376A1 引用较早专利 W02011138751A2

两组所选分子共享 2-氨基吡啶醚与氟苯片段

较晚专利 3 个实施例的 WT Ki 均报告为 <0.200 nM

研究假设 · 1

两个家族属于同一条相关系列，较晚家族以大环酰胺替代开链醚

未署名 · 等待你的判断

证据缺口 · 3

没有证据表明 Example 7 → Example 6 是真实优化步骤

跨专利测量未验证可比，只并列原始值

6 张证据卡未经独立化学家复核

下一步

补测建议第 1 位：6f 的细胞 IC50

6f → 6e 酶活性有利、外排比不利，缺细胞活性无法判断

6 张证据卡等待独立复核

具名确认后才能作为对外结论引用

确认默认噪声阈值

活性与外排比按 2 倍、LogD 按差值 0.5，均标为待化学家确认

外部来源尚未实连

ChEMBL、SureChEMBL、PubChem 在线核对前，新专利候选可能不全

ALK 大环系列 · 辉瑞







靶点 ALK · 人源 · ChEMBL4247 · 2 个专利家族 · 1 篇论文

概览 证据 SAR 分析 时间线与程序 对照 报告

下载台账 JSON

来源 L0 索引 L1 数据库 ✓ L2 转录 ✓ 复核状态 待确认 ✓ 已确认 ✓ 被拒绝 活性单位 nM pKi / pIC50 子结构 / SMILES 筛选 例如 Nc1ncccc10

色阶只在同一家族、同一 assay 列内比较；跨家族只并列，不算倍数

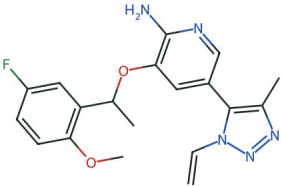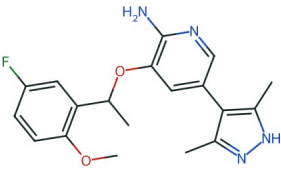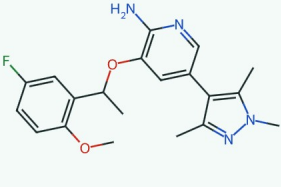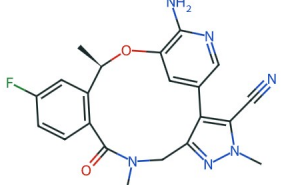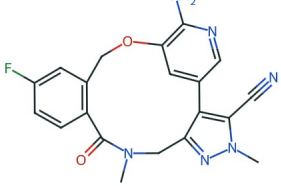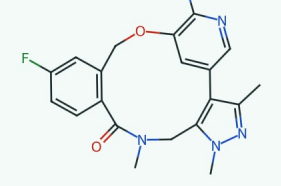对照	结构	实施例 · 来源	WT ALK 酶 Ki	L1196M 酶 Ki	WT 细胞 IC50	L1196M 细胞 IC50	MW	cLogP	TPSA	RotB
● W02011138751A2 家族 44278717 · 优先权 2010-05-04 · 活性表 PDF p.186 · assay 2/3 与细胞 ELISA										
☐		Example 1 L2 · 待确认 质谱一致 立体未指定 结构 PDF p.127 ↗	2.90 nM	18.0 nM	144 nM	950 nM	369.4	3.62	88.1	6
☐		Example 6 L2 · 待确认 质谱一致 立体未指定 通式 p.127 + 取代基表 p.128 ↗	0.620 nM	2.75 nM	未测 · 原表空白	未测 · 原表空白	356.4	3.96	86.0	5
☒		Example 7 L2 · 待确认 质谱一致 立体未指定 通式 p.127 + 取代基表 p.128 ↗	0.536 nM	3.16 nM	33.0 nM	177 nM	370.4	3.97	75.2	5
● W02013132376A1 家族 48142828 · 优先权 2012-03-06 · 活性表 Table 1 PDF p.436										
☐		Example 2 L2 · 待确认 质谱一致 10R 结构 PDF p.260 ↗	<0.200 nM	0.78 nM	1.33 nM	20.7 nM	406.4	2.80	110.1	0
☐		Example 4 L2 · 待确认 质谱一致 SFC 峰未分配 结构 PDF p.264 ↗	<0.200 nM	1.20 nM	28.1 nM	184 nM	392.4	2.24	110.1	0
☒		Example 6 L2 · 待确认 质谱一致 结构 PDF p.268 ↗	<0.200 nM	1.93 nM	6.41 nM	97.1 nM	381.4	2.68	86.3	0
● 洛拉替尼发现论文 Johnson et al., 2014 · ChEMBL 文档 ChEMBL3286195 · 29 个结构 · 247 条观测（含 MDR1 外排比、LogD、微粒体清除率）										L1 · 待确认
展开 29 行 ▾										

同列最强 同列最弱 限定值，不参与排序与倍数 未测，不填零 MW、cLogP、TPSA、RotB 为 RDKit 计算值

ALK 大环系列 · 辉瑞

靶点 ALK · 人源 · CHEMBL4247 · 2 个专利家族 · 1 篇论文

概览 证据 SAR 分析 时间线与程序 对照 报告

导出讨论材料

① 项目目标

目标模板

改善细胞活性，同时控制外排

先导化合物（只作配对锚点，不产生数值）

6e · CHEMBL3286809

台账中已有该结构，参与本次配对

必须保留的片段（SMARTS / SMILES，可选）

例如 2-氨基吡啶：Nc1ncccc1

范围：CHEMBL3286195 · WO2011138751A2 · WO2013132376A1

可变部分最多 12 个重原子

② 性质与实验映射 已由你确认

细胞活性 越低越好 · ≥ 2 倍
CHEMBL3293163 · CHEMBL3293164

外排比 目标区间 ≤ 2.5 · ≥ 2 倍
CHEMBL3293391（MDR1）· CHEMBL3293392

酶活性 越低越好 · ≥ 2 倍
CHEMBL3293161 · CHEMBL3293162

LogD 仅参考 · 差值 ≥ 0.5
CHEMBL3293165

噪声阈值为默认值，待化学家确认。未归入：TRKB Ki（脱靶，不当作活性）。

按替换

按位点

自动配对（MMP：单切与氢替换）· 只比较同一文档内的实验 · 不合成综合分数

取舍：部分目标性质有利、部分不利

C[*:1]>>[H][*:1] 去掉一个 N-甲基 · 2 个分子对 · 来源 CHEMBL3286195、WO2011138751A2

性质	方向与阈值	有利	不利	未变	缺失	本文档无该实验	证据等级
细胞活性	越低越好 · ≥2 倍				2		无可比数据
外排比	区间 ≤ 2.5 · ≥2 倍		1			1	较弱
酶活性	越低越好 · ≥2 倍	1		1			不一致

洛拉替尼发现论文 · 同一文档内比较		
A · 6f N,N-二甲基酰胺 [结构图]	B · 6e N-甲基酰胺 [结构图]	WT ALK 酶 Ki 22 → 2.8 nM L1196M 酶 Ki 310 → 35 nM MDR1 外排比 7.6 → 17 LogD 2.1 → 2.1 细胞 IC50 — → 116 / 1665 nM
		有利 · B/A 0.127 有利 · B/A 0.113 不利 · B/A 2.24 · 两者均不在 ≤ 2.5 内 未变 6f 无记录，无法判断

Example 7 → Example 6 WO2011138751A2 · 酶活性未变（B/A 1.16 / 0.87）· 细胞活性 B 未测 · 本文档无外排与 LogD 实验

补测建议

排序：可判断的分子对数 → 其中在其他目标性质上已有利的对数 → 该实验已有测量数。是否有样品、能否安排实验需另行确认。

- 16f · 细胞活性CHEMBL3293164 · 补测后可判断 2 个分子对（6f → 6d、6f → 6e），其中 2 个在其他目标性质上已有利；该实验已有 27 条测量
- 26f · 细胞活性CHEMBL3293163 · 同上 2 个分子对；该实验已有 24 条测量
- 38j · 酶活性CHEMBL3293161 · 可判断 2 个分子对（8j → 8f、8j → 8a），其中 1 个已有利；26 条测量
- 4Example 6 · 细胞活性WO2011138751A2 cell_L1196M_IC50 · 可判断 Example 1 → 6、Example 7 → 6

审查与署名

自动规则与人工复核分开记录；署名后以“研究假设”写入报告

限定值、重复观测已排除

只比较同一文档

所用观测均为待确认

结论

理由

支持

例如：去 N-甲基改善酶活性但外排变差，先补测 6f 细胞 IC50 再判断


把补测建议加入报告

署名并加入报告

ALK 大环系列 · 辉瑞

靶点 ALK · 人源 · ChEMBL4247 · 2 个专利家族 · 1 篇论文 概览 证据 SAR 分析 时间线与程序 对照 报告

候选程序 · Pfizer ALK 大环 2 个家族归为一组 · 按优先权日排列 ☒ 显示引用关系

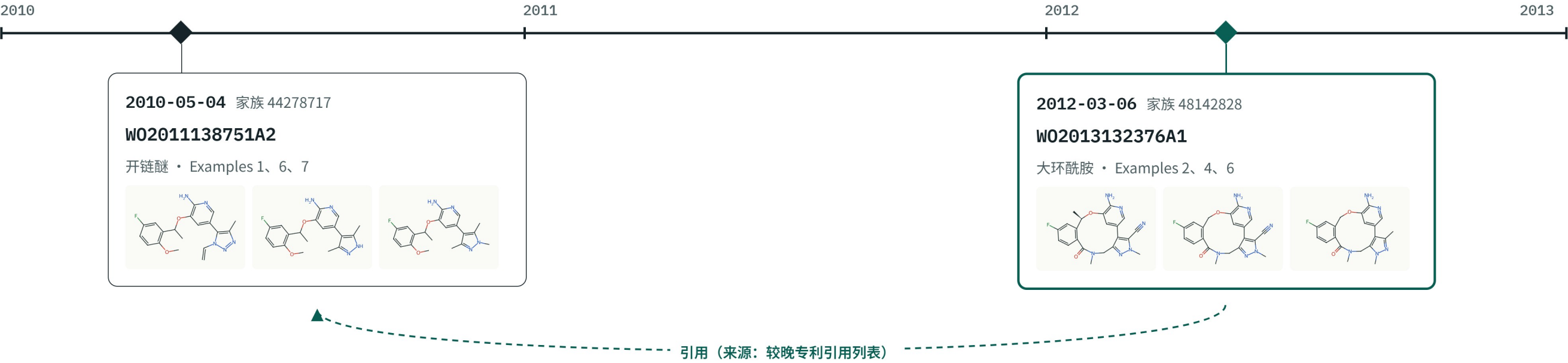

R 基团对齐 共同锚点: 2-氨基吡啶-3-醚 · 覆盖 6/6

实施例	连接 / 环系	R1 · 5 位杂芳环	R2 · 苄位	R3 · 芳环邻位	WT 细胞 IC50
A · Ex 1	开链醚	乙烯基-甲基-1,2,3-三唑	CH(CH ₃)	OMe	144 nM
A · Ex 6	开链醚	3,5-二甲基-1H-吡唑	CH(CH ₃)	OMe	未测
A · Ex 7	开链醚	1,3,5-三甲基吡唑	CH(CH ₃)	OMe	33.0 nM
B · Ex 2	大环酰胺	N-甲基-氰基吡唑	CH(CH ₃) · 10R	并入大环	1.33 nM
B · Ex 4	大环酰胺	N-甲基-氰基吡唑	CH ₂	并入大环	28.1 nM
B · Ex 6	大环酰胺	N-甲基-甲基吡唑	CH ₂	并入大环	6.41 nM

黄色标出与同家族上一行不同的位点。R 标签只在本次对齐中有效，不等于专利 R 编号；跨家族差异只描述已整理样本，不推断优化因果。

为什么归为一组

申请人一致 · 必要条件
两份专利申请人规范化后均为 Pfizer

发明人 · 骨架 · 靶点
三项信号各自的分数与依据, [分析运行后填入]

优先权日期
只用于排序，不参与打分

拆分分组 / 高级设置

ALK 大环系列 · 辉瑞

靶点 ALK · 人源 · ChEMBL4247 · 2 个专利家族 · 1 篇论文

概览

证据

SAR 分析

时间线与程序

对照

报告

加入报告


跨家族对照

两份专利分别测定：原始值并列展示，不计算 B/A 倍数；限定值不参与比较。

A W02011138751A2 · Example 7

L2 转录

2010-05-04

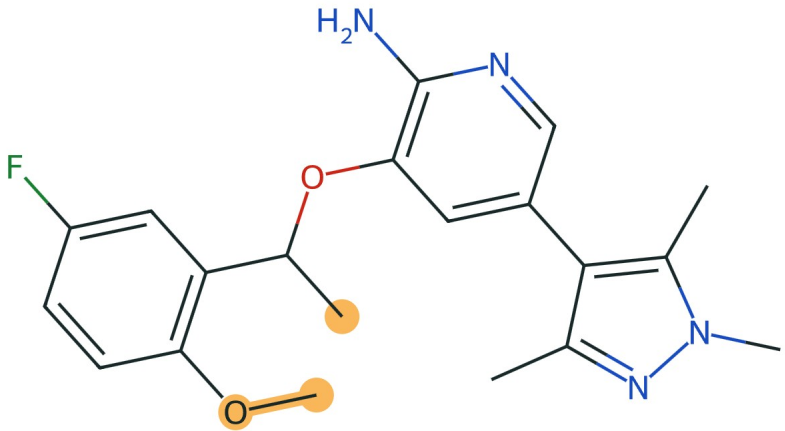


结构: [通式 p.127 + 取代基表 p.128 ↗](#) 活性: [PDF p.186 ↗](#) 立体未指定

B W02013132376A1 · Example 6

L2 转录

2012-03-06

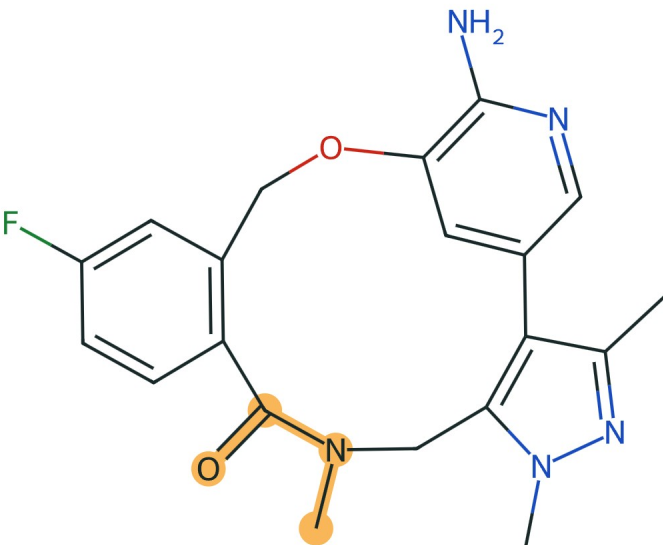

结构: [PDF p.268 ↗](#) 活性: [Table 1 PDF p.436 ↗](#)

高亮原子不在最大公共子结构内（24 原子 / 26 键，按元素与键级匹配）。A 的 α -甲基与邻位甲氧基不在 B 中；B 以 N-甲基酰胺连接芳环与吡唑侧，形成大环。

活性 · 原始值并列

Assay	A	B	比较
WT ALK 酶 Ki	0.536 nM	<0.200 nM	B 为限定值，不比较
L1196M ALK 酶 Ki	3.16 nM	1.93 nM	跨家族，只并列
WT EML4-ALK 细胞 IC50	33.0 nM	6.41 nM	跨家族，只并列
L1196M 细胞 IC50	177 nM	97.1 nM	跨家族，只并列

两份专利的协议描述相同（ATP 60 μ M，室温 1 h；NIH-3T3 EML4-ALK v1 细胞 1 h），但未确认实验批次可比。

计算性质 · RDKit

性质	A	B	Δ (B – A)
MW	370.4	381.4	+11.0
cLogP	3.97	2.68	-1.29
TPSA	75.2	86.3	+11.1
可旋转键	5	0	-5
HBD / HBA	1 / 5	1 / 5	0 / 0
重原子数	27	28	+1
环数	3	4	+1

我的判断 写入报告时标为“研究假设”，并附你的署名与本页证据链接

结论或假设

例如：大环化降低了可旋转键与 cLogP，可能与构象限制有关（待验证）

标记为证据缺口

署名并加入报告

复核队列

台账中所有“待确认”记录。确认或拒绝都要具名并写理由，审计日志只追加。

专利证据卡 · 6

加入台账 · [n]

PDF 抽取 · [n]

agent 提交 · [n]

排序

被分析引用次数 ▾

W02013132376A1 · Ex 2

结构 p.260 · 活性 p.436 · 4 项测量

W02013132376A1 · Ex 4

结构 p.264 · SFC 峰未分配

W02013132376A1 · Ex 6

结构 p.268 · 4 项测量

W02011138751A2 · Ex 1

结构 p.127 · 立体未指定

W02011138751A2 · Ex 6

通式 + 取代基表 · 2 项未测

W02011138751A2 · Ex 7


通式 + 取代基表 · 4 项测量

结构 · PDF
p.260

活性表 · PDF
p.436

协议 · PDF
p.435

印刷页 258 · 段落 p2076 · 快照 9094...045c

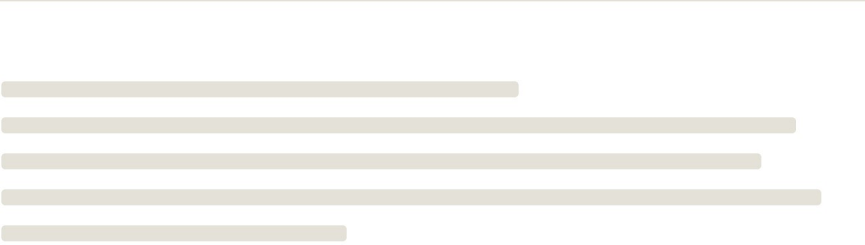

[原文 PDF 第 260 页渲染]


Example 2 最终产物图 · 定位框



W02013132376A1 · Example 2

L2 · 待确认

被 SAR 分析引用 [n] 次

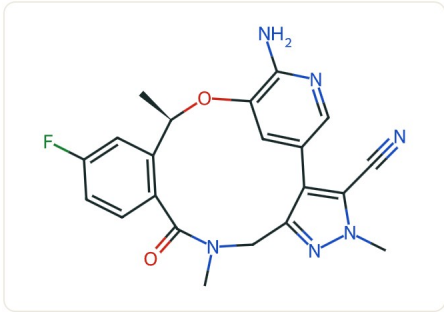

转录 SMILES 重绘，与左侧原图并排核对

立体：原图与名称指定 10R

质谱校验：报告 407 · 计算 [M+H]⁺ 407.16 · 一致

质谱只能发现原子数错误，查不出同分异构与立体错误

C[C@H]10c2cc(cnc2N)-c2c(nn(C)c2C#N)CN(C)C(=O)c2ccc(F)cc21

逐项核对

- ☒ 连接关系与原图一致
- ☒ 立体中心与原图一致（10R）
- ☐ 4 项测量与 Table 1 一致，限定符保留
- ☐ assay 列对应正确（非 assay 1 IC50）

WT 酶 Ki	<0.200 nM
L1196M 酶 Ki	0.78 nM
WT 细胞 IC50	1.33 nM
L1196M 细胞 IC50	20.7 nM

复核人（具名）

理由（必填）

[你的姓名]

例如：与 PDF p.260 结构图及 Table 1 逐

ALK 大环系列 · 辉瑞

靶点 ALK · 人源 · ChEMBL4247 · 2 个专利家族 · 1 篇论文

概览

证据

SAR 分析

时间线与程序

对照

报告

竞对 SAR 调研

ALK 大环系列 · 辉瑞

作者 [你的姓名] · 生成于 [导出日期] · 2 个专利家族 · 1 篇论文 · 已确认证据 0 条，其余均标 “待确认”


1 结论摘要

[由你撰写。工具不自动生成结论；对照页和 SAR 分析页中署名的判断会以 “研究假设” 列在第 5 节。]

2 家族时间线

优先权日	公开号	家族	收录实施例
2010-05-04	W02011138751A2	44278717	Examples 1、6、7（开链醚）
2012-03-06	W02013132376A1	48142828	Examples 2、4、6（大环酰胺），引用上一家族


3 关键对照 · Example 7 与 Example 6

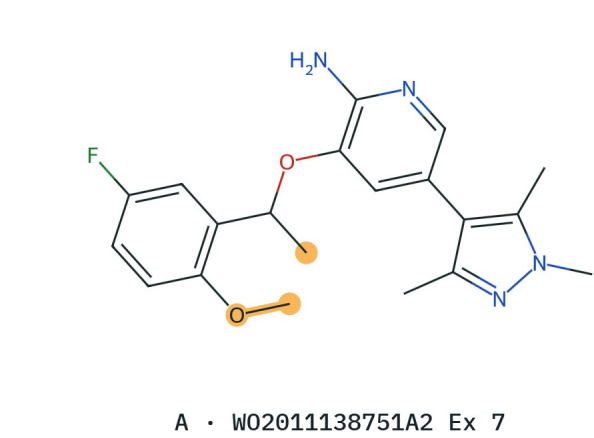

Assay（原始值并列，跨家族不算倍数）

WT ALK 酶 Ki

WT EML4-ALK 细胞 IC50

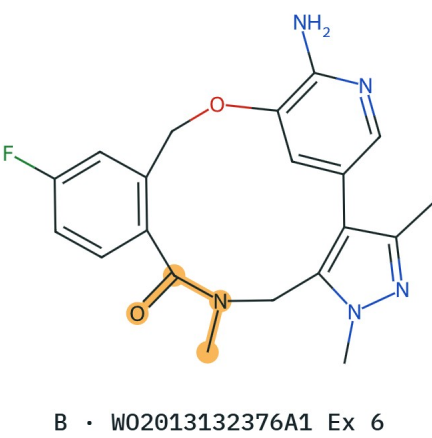

A

0.536 nM

33.0 nM

B

<0.200 nM

6.41 nM

4 SAR 分析 · 讨论材料

目标：改善细胞活性，同时控制外排 · 阈值为默认值（待化学家确认） · 不合成综合分数

去 N-甲基（2 对）

取舍：6f → 6e 酶 Ki 有利（B/A 0.127 / 0.113），MDR1 外排比不利（B/A 2.24），LogD 未变；细胞活性缺 6f 数据

补测建议

① 6f 细胞 IC50（ChEMBL3293164）② 6f 细胞 IC50（ChEMBL3293163）③ 8j 酶 Ki（ChEMBL3293161）

5 事实、假设与缺口

事实

较晚专利引用较早专利；所选分子共享 2-氨基吡啶醚与氟苯片段

研究假设

两家族属于同一相关系列（未署名）

证据缺口

无直接演化证据；跨专利可比性未确认；未经 L3 复核

附录 · 证据来源

实施例	等级	结构来源	活性来源
W02011138751A2 Ex 1	L2	PDF p.127	PDF p.186 下方表
W02011138751A2 Ex 6	L2	PDF p.127 + p.128	PDF p.186（细胞 2 项未测）
W02011138751A2 Ex 7	L2	PDF p.127 + p.128	PDF p.186 下方表
W02013132376A1 Ex 2	L2	PDF p.260	Table 1 PDF p.436
W02013132376A1 Ex 4	L2	PDF p.264	Table 1 PDF p.436
W02013132376A1 Ex 6	L2	PDF p.268	Table 1 PDF p.436

导出

格式

☒ PDF · 用于汇报 新增

☐ Markdown 讨论材料 现有

☐ 证据与分析 JSON 现有

包含内容

☒ L2 转录证据（标注未复核）

☐ L1 数据库测量

☒ 来源快照哈希与读取时间

报告中的证据均未经具名确认，每一处引用都会带 “待确认” 标记。

导出 PDF

[先去复核 6 条证据 →](#)


SMILES (最多 2000 字符 / 200 个原子)

C[C@H]1Oc2cc(cnc2N)-c2c(nn(C)c2C#N)CN(C)C(=O)c2ccc(F)cc21

在结构编辑器中修改

上传 MOL / SDF

解析结果 · 本地 RDKit

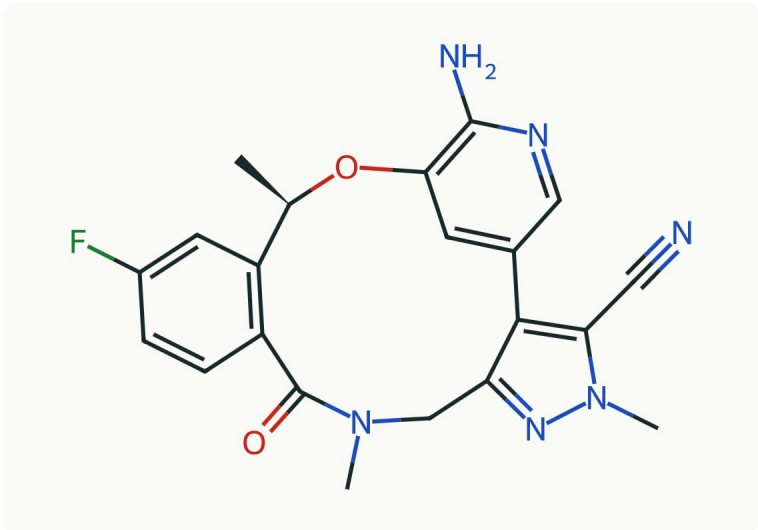

分子式	C21H19FN6O2
MW	406.4
InChIKey	IIXWYSCJSQVBQM-LLVKDONJSA-N
立体	1 个立体中心, 已指定 R
组分	单组分, 未检测到盐或溶剂

解析成功 · 30 个重原子 · 结构未离开本机

1 匹配方式

☒ 精确

现有

标准化后按标准 InChIKey 匹配 (含立体层); 会合并盐型与互变异构形式

☐

精确 · 忽略立体

新增

InChIKey 前 14 位一致; 对映体、消旋体与未指定立体一并列出

☐

子结构

现有

以输入为片段, 至少 6 个重原子; 不做互变异构标准化

☐

相似性

现有

☐ Morgan 半径 2、2048 位 · Tanimoto; 只排序, 不作证据

≥

70

%

2 检索范围

☒

本地证据台账 · 4 份文档 · 37 条结构记录 · 离线

现有

☒

我的调研中上传 PDF 抽取出的结构

新增

☒

ChEMBL: 分子、测量与来源文档

现有

待在线核对

☐

SureChEMBL: 专利中自动提取的结构, 异步检索

现有

待在线核对

☐

PubChem 交叉引用: 关联专利与 PubMed 文献

现有

待在线核对

将发送: ChEMBL 精确检索发送标准 InChIKey, 相似性与子结构发送标准化后的 SMILES; SureChEMBL 发送标准化后的 SMILES。未公开的内部结构请只查本地。

3 标准化

☒

去盐和溶剂、中和、统一互变异构

现有

实际做了哪些改动逐步记录, 并排显示标准化前后结构; 互变异构改变立体信息时提示

4 命中后

☒

先预览全部命中, 再选择加入

新增

☐


精确命中以“待确认”加入「ALK 大环系列」

新增

精确 · 本地台账 + PDF 抽取 + ChEMBL · 标准化

保存为常用条件

检索 →

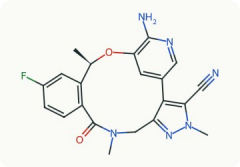

C[C@H]1Oc2cc(cnc2N)-c2c(nn(C)c2C#N)CN(C)C(=O)c2ccc(F)cc21

精确 · 标准 InChIKey 本地台账 + ChEMBL + SureChEMBL + PubChem 已标准化 · 结构未改变

修改条件

放宽为忽略立体

检索覆盖报告

现有

未命中不代表不存在：范围仅限所列来源，受阈值、标准化和返回上限影响

来源	状态	命中 / 显示	说明
本地证据台账	已查询	2 / 2	2 份文档，均有测量
ChEMBL	待在线核对	[n] / [n]	远程命中逐个经本地 RDKit 复核，不一致标红不删除
SureChEMBL	待在线核对	[n] / 20	每次取前 20 个；达到服务端 10,000 上限时提示
PubChem 交叉引用	待在线核对	[n] / 20	关联专利与 PubMed 各前 20 条附总数；可能与 SureChEMBL 同源

当前命中中最早的披露 新增

W02013132376A1

优先权 2012-03-06 · Example 2

目前只按本地命中计算；外部来源实连后会更新，也不代表全部公开文献

来源

☒ 来源：本地台账

[n]

☒ 来源：ChEMBL

[n]

☒ 来源：SureChEMBL / PubChem

[n]

文档类型

☒ 专利

☒ 论文

☐ 无文档定位的记录

申请人 / 机构

☒ Pfizer

☒ 其他

年份

起

—

止

☐ 隐藏已在调研中的命中

☐ 全选当前筛选

排序

最早日期在前

列表

时间轴

专利 · 按家族合并 新增 同族公开折叠显示；实施例编号不跨公开继承；多来源命中同一专利时合为一行，来源并列标注

☒	2012-03-06 家族 48142828	W02013132376A1 + 同族公开 [n] 项 Pfizer · 本结构为 Example 2 (PDF p.260) · Table 1 测量 4 项	精确	L2 · 本地台账	已在「ALK 大环系列」 打开证据卡→
☒	[优先权日] 家族 [家族号]	[公开号] + 同族公开 [n] 项 [申请人] · 来源 SureChEMBL 与 PubChem（可能同源，并列显示）· 是否为实施例待核实	精确	L0 自动提取	核实并加载专利
☐	[优先权日] 家族 [家族号]	[公开号] [申请人] · 仅 PubChem 关联 · 文中位置未知	精确	L0 关联	核实并加载专利

论文

☒	2014 PubMed 24819116	Johnson et al. · 洛拉替尼发现论文 Pfizer · 本结构为化合物 8k (ChEMBL3286830) · 本地台账 56 条观测 · 已在「ALK 大环系列」	精确 · 含立体	L1	为什么命中 ·
-------------------------------------	-------------------------	--	----------	----	---------

无文档定位的记录 [n] 条 · 已按筛选隐藏，只在分子层级显示测量

输入 SMILES → InChIKey IIXWYSCJSQVBQM-LLVKDONJSA-N → 分子 ChEMBL3286830 → 文档 ChEMBL3286195 → 论文 · 化合物 8k

← 首页

从 PDF 开始

文件只在本机解析；抽取结果以“待确认”写入台账，具名复核后才用于结论

专利

W02013132376A1.pdf

[n] 页 · 解析中 4 / 6 步

论文

[你上传的论文].pdf

排队中 · 识别 DOI / PMID 后可关联 ChEMBL 文档

继续拖入 PDF，或点击选择

选择文件未选择任何文件


扫描版 PDF 没有文本层时改用 OCR，页码与定位框照常保留；识别失败的页面单独列出，不会被静默跳过。

✓	1 读取与校验	SHA-256 88f35d03...3096 · 有文本层	新增 · 上传入口
✓	2 识别文档	专利 · 公开号 W02013132376A1 · 与已知公开 PDF 哈希一致	新增 · 来源等同公开版本
✓	3 公共记录匹配	家族 48142828 · 优先权 2012-03-06 · 已在调研「ALK 大环系列」	现有 · 可选联网
🔄	4 页面分区	识别活性表、实施例、中间体页并保留依据 · 已定位 Table 1（PDF p.436）	现有 · 仅在示例页上测过
○	5 逐级抽取	结构图与活性表；编号核对、冲突保留、质谱与名称交叉校验给出置信度	控制逻辑现有 · 抽取器新增 (I3b)
○	6 写入台账	以“待确认”提交；实验对不上的记录拒绝并说明原因；生成低置信度在前的复核报告	现有

抽取预览

全部为 L0 · 待确认，尚未与原文逐项核对

与调研中已有证据卡相同的结构会自动合并

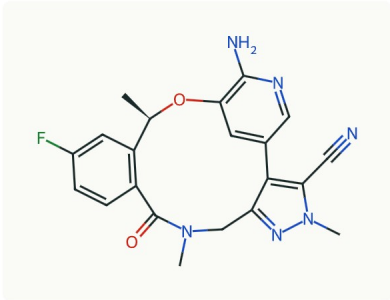

Example 2p. 260

与已有 L2 证据卡一致 · 合并

结构识别中

Example [n]p. [n]

待核对

通式 + 取代基表
需人工组合

Example [n]p. [n]

无法自动识别 · 已标记

结构识别中

Example [n]p. [n]

待核对

可以在抽取完成前开始核对已识别的条目

只保存文档

新建调研

加入「ALK 大环系列」并开始核对 →